

# Siège de toilette surélevé

Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions de votre fournisseur de soins médicaux.

## À quoi sert un siège de toilette surélevé?

Un siège de toilette surélevé sert à hausser le siège d'une toilette à une hauteur confortable. Il permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever plus facilement. Des accoudoirs de toilettes peuvent être utilisés avec le siège de toilette surélevé.

## Comment installer le siège de toilette surélevé?

### Siège de toilette surélevé rembourré (Figure 1)

- Relevez le siège et le couvercle de la toilette.
- Placez le siège de toilette surélevé de façon à ce que la partie la plus haute soit près de l'arrière de la toilette et que l'anneau interne s'appuie sur l'ouverture de la cuvette.
- Poussez sur le siège de toilette surélevé afin qu'il s'insère bien dans la cuvette de toilette.

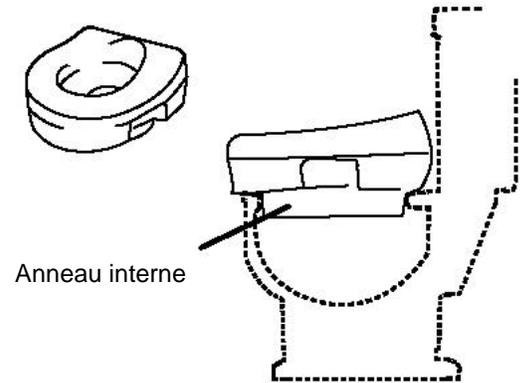


Figure 1 : Siège de toilette surélevé rembourré

### Siège de toilette surélevé muni d'un bouton de réglage (Figure 2)

(Figure 2)

- Relevez le siège et le couvercle de la toilette.
- Tournez le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de desserrer l'équerre de réglage. Ceci permettra au siège de toilette surélevé de s'ajuster dans la cuvette de toilette.
- Placez le siège de toilette surélevé sur l'ouverture de la cuvette, en accrochant les ailettes arrière sous le rebord de celle-ci. Assurez-vous que le siège s'appuie entièrement sur l'ouverture de la cuvette. Le bouton de réglage doit être positionné à l'avant de la cuvette.
- Centrez le siège de toilette surélevé sur l'ouverture de la cuvette et poussez-le vers le fond aussi loin que possible.
- Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin de resserrer l'équerre de réglage. Tournez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tournez encore sur une distance de 0,3 cm, pour bien fixer le siège. Ne tournez le bouton qu'avec vos mains. N'utilisez pas de clé.
- Si l'arrière du siège surélevé est bloqué par le siège ou le couvercle de la toilette, vous devrez enlever le siège de toilette afin d'ajuster correctement le siège surélevé.

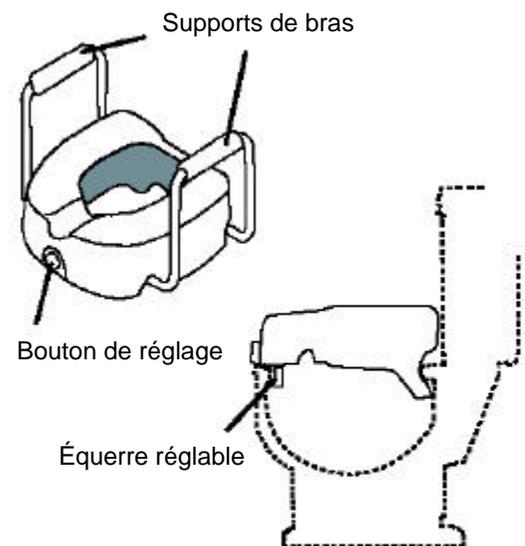


Figure 2 : Siège de toilette surélevé muni d'un bouton de réglage



**AVERTISSEMENT** Ce type de siège de toilette surélevé n'est pas conçu pour être installé de façon permanente. Il doit être desserré et resserré une fois par semaine afin d'assurer un ajustement adéquat.

### Siège de toilette surélevé à hauteur réglable (Figure 3)

- Relevez le siège et le couvercle de la toilette.
- Assurez-vous que tous les étriers de fixation sont à la même hauteur.
- Abaissez le siège sur la cuvette tout en vous assurant que les étriers de fixation glissent à l'extérieur de celle-ci. Si les étriers de fixation ne sont pas correctement alignés sur la cuvette, desserrez les boulons qui les retiennent au siège et ajustez leur position. Resserrez bien les boulons après l'ajustement.



**AVERTISSEMENT** Ne pliez pas les étriers de fixation en métal pour les ajuster à la cuvette.

- Pour régler la hauteur du siège, desserrez les écrous et les boulons des étriers de fixation et faites glisser ceux-ci vers le haut ou vers le bas. Resserrez les écrous et assurez-vous que la partie interne des étriers de fixation ne peut pas pivoter du tout.



Croix-Rouge  
canadienne

**⚠ AVERTISSEMENT** Ce type de siège de toilette surélevé n'est pas conçu pour être installé de façon permanente. Il doit être desserré et resserré une fois par semaine afin d'assurer un ajustement adéquat.

**Comment utiliser le siège de toilette surélevé? (tous les modèles)**

**⚠ AVERTISSEMENT** La supervision ou l'assistance d'une autre personne est recommandée lorsqu'une personne aux capacités physiques limitées utilise le siège de toilette surélevé.

**⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le siège de toilette surélevé tient fermement en place.

- Reculez vers le siège de toilette surélevé jusqu'à ce que l'arrière de vos jambes le touche.
- Si l'appareil est muni d'appuie-bras ou de poignées de maintien, tendez les bras vers l'arrière et saisissez-les.

**⚠ AVERTISSEMENT** Les supports de bras sont uniquement conçus pour aider la personne qui s'assoit. Ne faites pas porter sur les supports de bras tout le poids de votre corps.


- Assoyez-vous lentement sur le siège de toilette surélevé. Si possible, fléchissez les coudes, le tronc et les genoux.

**AVERTISSEMENT** Sièges rembourrés : assurez-vous que votre poids porte sur le centre du siège de toilette surélevé. Si vous vous penchez trop vers l'avant ou vers les côtés, le siège peut basculer.

- Pour vous relever, poussez sur les appuie-bras ou sur le siège, afin que votre mouvement soit aussi confortable que possible. Assurez-vous de votre équilibre avant de lâcher le siège ou les appuie-bras.

### Entretien du siège de toilette surélevé

- Utilisez de l'eau chaude et un détergent ou un produit de nettoyage non abrasif.
- Rincez bien puis essuyez à l'aide d'un linge doux.
- Si le siège de toilette est muni de supports de bras, assurez-vous que les poignées de mousse sont fixes et qu'elles ne peuvent pas tourner.
- Si vous utilisez un siège de toilette surélevé muni d'un bouton de réglage à l'avant, vérifiez si des fissures apparaissent autour du mécanisme d'ajustement situé sous le siège.

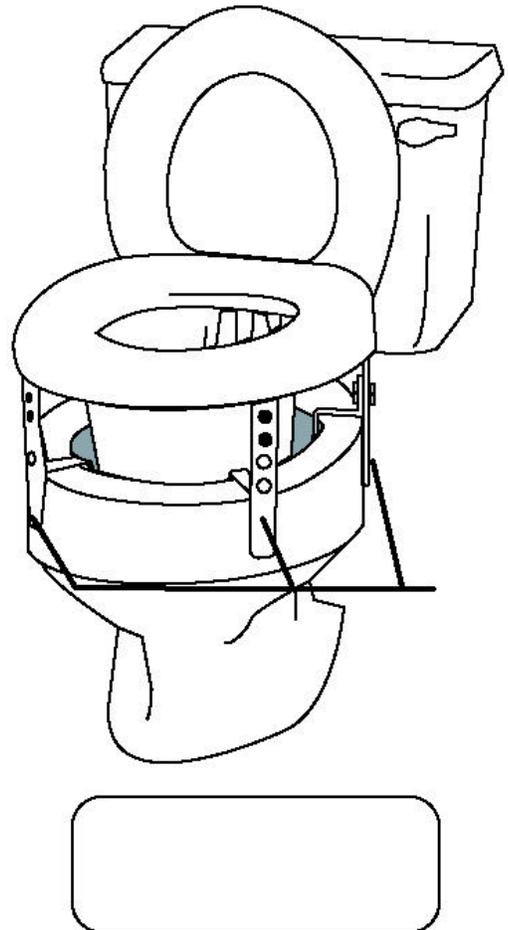

*Veillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la Croix-Rouge.*